

- Die maximale Anwendungsdauer ohne ärztliche Kontrolle beträgt 29 Tage.
- Maximale Verwendbarkeitsdauer liegt bei 3 Zyklen á 29 Tage.
- Die Verträglichkeit und Richtigkeit der Pessarlage ist durch Ultraschall und/oder Befragung der Patientin sicherzustellen.
- Vor jeder Anwendung ist das Schalenpessar FRANK auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der Oberfläche ist das Schalenpessar durch ein Neues zu ersetzen.
- Verwenden Sie keine weiteren Hilfsmittel beim Entfernen des Schalenpessars FRANK. Sollte das Entfernen nicht möglich sein, lassen Sie das Schalenpessar FRANK in den nächsten Tagen von einem Arzt entfernen.
- Nicht während der Menstruation und nie zusammen mit einem Tampon verwenden oder mit ärztlicher Rücksprache.
- Das Schalenpessar FRANK ist aus Silikon und physiologisch unbedenklich. Es entspricht den Richtlinien des MPG (Medizin-Produkte-Gesetz).
- Das Schalenpessar FRANK kann bei Verwendungsunterbrechung gereinigt und in trockenem Zustand in einem sauberen Polybeutel verpackt aufbewahrt werden.
- Das Schalenpessar FRANK kann nach Verwendung über den Hausmüll entsorgt werden.



Auskunft und Info:



Büttner-Frank GmbH

Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen

www.buettner-frank.de

- Germany -



CE 0197

V2019-12.3
BNR 606241



Büttner-Frank GmbH

Schalenpessar FRANK

aus Silikon mit biegsamer Faltzone

Anwendungsbereich:
Zur Behandlung bei verschiedenen Graden der Gebärmutter- und Scheidensenkung, Deszenus des Blasenhalses, Harninkontinenz und Beckenbodenschwäche.



GEBRAUCHSANWEISUNG



Hersteller:

Büttner-Frank GmbH • Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen

Telefon: 09131/79 05-0 • Fax: 09131/60 27 69

E-Mail: kundenservice@buettner-frank.de • www.buettner-frank.de



**Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner**

Einsetzen des Schalenpessars FRANK




Vor der ersten Anwendung reinigen Sie das Schalenpessar FRANK durch Auskochen in reichlich Wasser für ca. 5 Minuten. Spülen Sie es anschließend mit kaltem Wasser ab und lassen Sie das Schalenpessar FRANK trocknen.

Kontrollieren Sie vor dem Einführen das Schalenpessar FRANK auf Unversehrtheit, Sauberkeit, Verfärbungen, Schäden und Abnutzung. Bei sichtbaren Schäden oder Veränderungen der Oberfläche ersetzen Sie das Schalenpessar FRANK durch ein Neues.

Das Schalenpessar FRANK morgens in die Scheide einführen und abends wieder entfernen, damit sich das empfindliche Scheidengewebe über Nacht erholen kann. Halten Sie sich jeweils an die Anweisungen Ihres Arztes.

Vor dem Einsetzen waschen Sie sich bitte die Hände. Führen Sie nun das gefaltete Schalenpessar FRANK in die Scheide ein. Um dies zu erleichtern, können Sie verschiedene Positionen ausprobieren z.B. ein Bein auf die Bettkante stellen, das Schalenpessar FRANK in der Hocke oder im Liegen einführen, oder sich beim Einführen mit gespreizten Beinen an eine Wand stellen. Schieben Sie das Schalenpessar FRANK in die Position, die Ihnen Ihr Arzt gezeigt hat.

Achten Sie darauf, dass Sie das gefaltete Schalenpessar zunächst ins hintere Scheidengewölbe einlegen. Das Schalenpessar FRANK sitzt in der richtigen Position, wenn es nicht drückt.

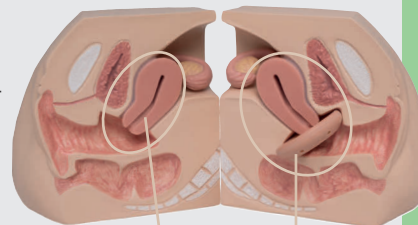

ohne Pessar mit Schalen-Pessar

Entfernen des Schalenpessars FRANK

Bitte waschen Sie sich auch vor dem Entfernen die Hände. Zur Erleichterung des Entfernens können Sie den Scheidenbereich mit Gleitgel benetzen. Fassen Sie nun das Schalenpessar FRANK mit dem Zeigefinger (am Besten im Schalenloch) und ziehen Sie das Schalenpessar aus der Scheide heraus.

Reinigung des Schalenpessars FRANK

Die Reinigung des Pessars erfolgt in warmem sauberem Leitungswasser in einer Spüle/Wanne.

Dazu:

- Tränken Sie eine weiche Reinigungsbürste im Wasser.
- Bürste jeweils auf allen Oberflächen ansetzen und entlangbürsten. Sicherstellen, dass alle Öffnungen erreicht sind.
- 2 x den Vorgang wiederholen
- Pessar aus dem Wasser entnehmen.
- Zum Schluss das Pessar unter fließendem Wasser bis zur optischen Sauberkeit abspülen.

f. Trocknen lassen

Eine Verwendung von Desinfektions- oder Seifenlösung ist nicht notwendig. HINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Haushaltsreiniger oder Spülmittel zur Reinigung. Legen Sie das Schalenpessar FRANK nicht in die Mikrowelle.

Kontraindikationen:

Silikon-Allergie; Urge-Inkontinenz; lokale Infektionen (aktive Infektionen der Vagina oder des Urogenitaltraktes); Schwangerschaft; sexuelle Aktivität von Frauen, die das Pessar nicht selbstständig entfernen und wieder einsetzen können.

Risiken/Nebenwirkungen:

Ulzera (Druckgeschwür), Gewebeüberdehnung

Material:

Silikon

Allgemeine Hinweise:

- Lesen Sie und beachten Sie bei der Anwendung diese Gebrauchsanweisung.
- Anleitung durch medizinisches Fachpersonal.
- Das Schalenpessar FRANK ist nur zur Anwendung an der gleichen Patientin bestimmt.**
- Mehrfachverwendung bei gleicher Patientin ist möglich.



Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner

Infos unter: Tel. 09131 / 79 05-0 • Fax. 09131 / 60 27 69 • E-Mail: kundenservice@buettnner-frank.de • www.buettnner-frank.de